

22 Fr.




26020 FA HOPKINS II 12° 内窥镜
12° 电切镜，超广角，直径2.9 mm，
可高温高压消毒



26055 EBH 工作手件
1x双极工作手件 1x双极球状电极
2x双极电切环 1x双极高频导线
1x双极针状电极 1x保护管




26055 SC 镜鞘
可旋转连续灌流电切镜鞘，斜口，
陶瓷绝缘，22 Fr.
360° 便捷锁扣

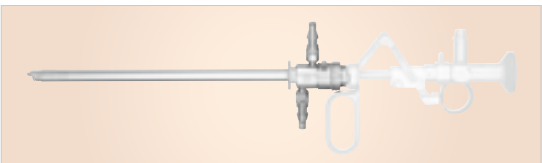

26055 LD 镜鞘
可旋转连续灌流电切镜鞘，斜口，
陶瓷绝缘，22 Fr.



26055 CO 闭孔器
22 Fr.,配合电切镜鞘26055SC及
26055LD 使用

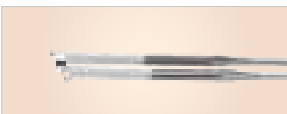

26055 GP
双极电切环



26055 NB
双极电切环，球状



26055 BL
双极电切环，针状

冲洗吸引系统



26331020-1 HAMOU ENDOMAT
• 适用于宫腔镜膨宫或腹腔镜冲洗吸引
• 自动识别器械
• 压力、流速等功能参数面板上精确显示
• 预设值与实际值并排显示，方便观察
• 根据压力变化，自动调整压力或暂停灌注

国械注进 20162224735 冲洗吸引系统



沪医械广审(文)第 2017092172 号

国械注进 20163225157	宫腔电切镜及附件
国械注进 20162225009	宫腔镜无源器械
国械注进 20173220132	腹腔镜有源器械
国械注进 20162224735	冲洗吸引系统

制造商: KARL STORZ Gmbh & Co, KG
禁忌内容或注意事项详见说明书

KARL STORZ ENDOSCOPY (SHANGHAI) LTD.
卡尔史托斯内窥镜（上海）有限公司
上海市虹桥路1号 港汇中心一座36层
Tel: (021)61131188
Fax: (021)61131199
Zip Code: 200030

KARL STORZ GmbH & Co. KG
Mittelstraße 8, 78532 Tuttlingen, Germany
Postbox 230, 78503 Tuttlingen, Germany
Phone: +49 (0)7461 708-0
Fax: +49 (0)7461 708-105
E-Mail: info@karlstorz.com




Bipolar Resectoscopes
宫腔双极电切系统



产品特点

双极电切系统 手术放心保障

双极电切系统独特的双环设计，保证了电流不会通过镜鞘，从而大大降低术中对宫颈及周边组织的神经刺激和电灼伤的危险。回流电极处于视野内，是真正的双极电切系统。

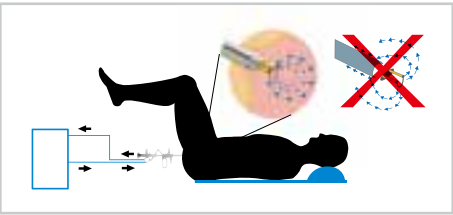

盐水中电切

与AUTOCON II 400 SCB高频发生器配合使用，实现优异的电切及电凝效果。



两款不同规格，满足术者需求

提供标准26 Fr. 及22 Fr. 两款电切镜，更纤细的22Fr. 外鞘使进入宫腔更顺畅、更无创，特别适用于宫颈狭窄或未经生育的妇女。



高度的产品兼容性

双极电切手柄可与传统电切镜及镜鞘兼容，操作方式类似，易于熟练掌握。



多种电切组件可供选择





不同样式的电切环可用于不同适应症，满足宫腔电切的多种需求。



国械注进 20163225157 宫腔电切镜及附件
国械注进 20173220132 腹腔镜有源器械

推荐配置

26 Fr.

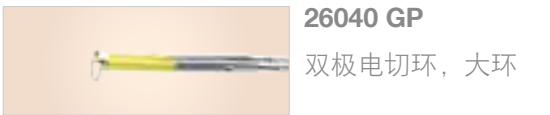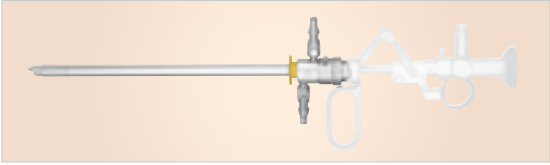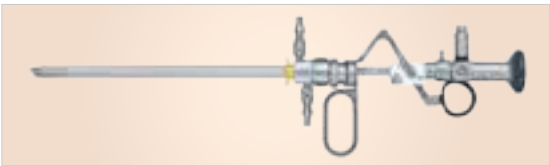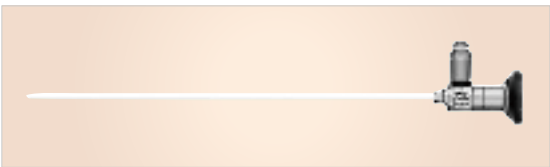

26105 FA HOPKINS II 12° 内窥镜
12° 电切镜，超广角，直径4.0 mm，可高温高压消毒

26040 EBH 工作手柄
1x双极工作手柄 1x双极球状电极
2x双极电切环 1x双极高频导线
1x双极针状电极 1x保护管

26050 SC 镜鞘
可旋转连续灌流电切镜鞘，斜口，陶瓷绝缘，26 Fr.
360° 便捷锁扣

26050 SL 镜鞘
可旋转连续灌流电切镜鞘，斜口，陶瓷绝缘，26 Fr.

26040 OC 闭孔器
26 Fr., 配合电切镜鞘26050SC及26050SL 使用



国械注进 20163225157 宫腔电切镜及附件
国械注进 20173220132 腹腔镜有源器械
国械注进 20162225009 宫腔镜无源器械

宫腔双极电切系统

