

细胞科学 守护生命  
Saving Lives With Cell Science



# NK细胞培养系列产品

Products For NK Cell Culture



**Baso<sup>®</sup>**  
貝索細胞

珠海贝索细胞科学技术有限公司

珠海市香洲区同昌路286号2栋第四层

0756-3324920

1417652563

csbaso@163.com

www.csbaso.com



**Baso<sup>®</sup>** 珠海贝索细胞科学技术有限公司  
貝索細胞 ZHUHAI BASO CELL SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD

\*内容仅供参考,如有变动,恕不另行通知,珠海贝索细胞科学技术有限公司保留其最终解释权。

## BC-515NK 无血清细胞培养基

BC-515NK是专为NK细胞免疫治疗研究而开发的无血清细胞培养基,使用基因重组和医疗级人类蛋白,不含有动物源成分,可实现较高增殖性,适用于NK细胞的高增殖体外培养试验等。

- 提升NK细胞数量、纯度及杀瘤能力
- 稳定的缓冲体系,满足细胞体外培养高密度增殖的需求
- 细胞活化与扩增二合一,只需在NK细胞活化阶段添加少量血清即可




产品编号	产品名称	型号	说明	规格
CS011	无血清细胞培养基	BC-515NK	NK细胞培养用无血清细胞培养基	200ml/500ml/1000ml

## ALyS™ 505NK-AC & EX 无血清细胞培养液

ALyS505NK是专为NK细胞免疫治疗而设计的无血清细胞培养液,

使用基因重组和医疗级人类蛋白,不含有动物源成分,特殊的配方和培养技术保持细胞的高增殖性。

- ALyS505NK主要用于支持NK细胞体外无血清培养。
- 培养液由ALyS505NK-AC活化培养液和ALyS505NK-EX扩增培养液组成,独特的配方和培养技术,显著提高细胞数量和CD3 CD56<sup>+</sup>比例。
- NK细胞活化阶段添加少量血清有利于细胞的活化和增殖,细胞扩增阶段后无需添加。

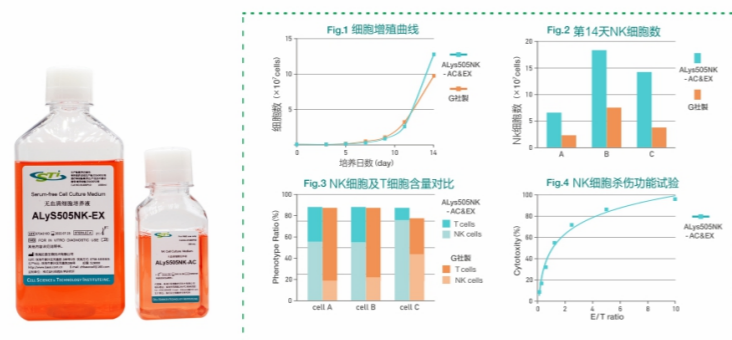


产品编号	产品名称	型号	说明	规格
01600P02	无血清细胞培养液	ALyS505NK-AC	NK细胞活化用无血清培养液	200ml
01400P10	无血清细胞培养液	ALyS505NK-EX	NK细胞扩增用无血清培养液	1000ml

## NK Cell Induction Reagent NK细胞诱导试剂

NK Cell Induction Reagent是专为人外周血单个核细胞诱导NK细胞而研发的专用高效诱导试剂。

- 独特的NK细胞高效诱导方案与扩增技术,配套细胞治疗研究专用ALyS505NK-AC&EX无血清细胞培养液、BC-515NK无血清细胞培养基使用,高效诱导活化NK细胞,使NK细胞具有高增殖、高纯度、杀伤性强等特点。
- 本试剂盒由优质细胞因子组合优化,不含动物源成分,内含NK-A Reagent, NK-B Reagent,使PBMC诱导NK细胞培养操作标准化和简易化。
- 20ml起始体系,终体系为3.2L,可收获60~80亿细胞,CD3 CD56<sup>+</sup>比例为80%左右。

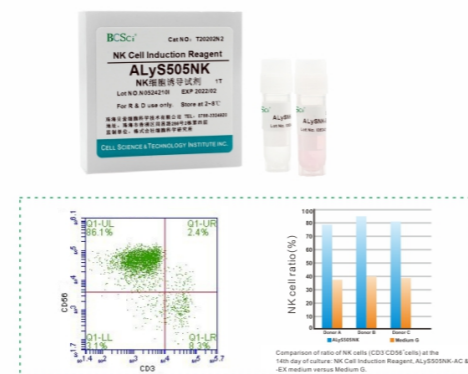


产品编号	产品名称	型号	说明	规格
T20202N2	NK细胞诱导试剂	ALyS505NK	无动物蛋白成分,高效培养,纯度更高	1T

## NK Cell Induction Kit NK高效诱导试剂盒

NK Cell Induction Kit是专为NK细胞活化诱导而设计的新一代NK细胞培养试剂盒。

- 主要用于NK细胞体外活化诱导培养,配套BC-515NK无血清培养基使用,提高细胞增殖倍数、NK细胞纯度和杀瘤活性,同时使NK细胞培养操作标准化和简易化。
- 本试剂盒由优质细胞因子组合优化,不含动物源成分。
- 20ml起始体系,终体系为2.5L,可收获60~70亿细胞,CD3 CD56<sup>+</sup>比例为80%左右。

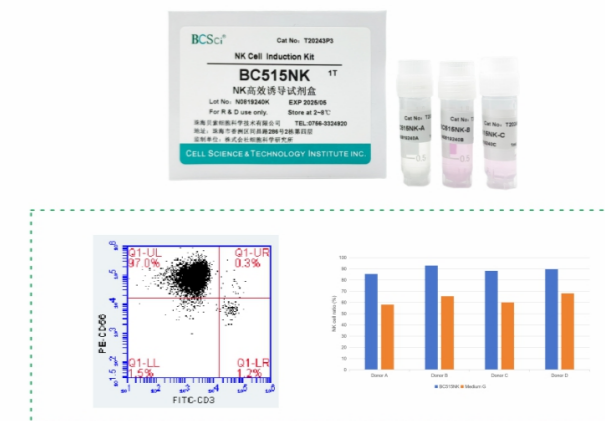


产品编号	产品名称	型号	说明	规格
T20243P3	NK高效诱导试剂盒	BC515NK	无动物蛋白成分,纯度更高,杀瘤性强	1T

## Umbilical Cord Blood NK Cell Induction Kit 脐血NK诱导试剂盒

Umbilical Cord Blood NK Cell Induction Kit是为脐带血单个核细胞诱导NK细胞而研发的专用高效培养试剂盒。


- 独特的脐血NK细胞高效诱导方案与扩增技术,配套BC-515NK无血清培养基使用,使脐血NK细胞具有高增殖、高纯度、杀伤性强等特点。
- 本试剂盒不含动物源成分,内含脐血NK细胞包被液、脐血NK细胞诱导液、脐血NK细胞活化液、脐血NK细胞添加剂,使脐血来源诱导NK细胞培养操作标准化和简易化。
- 本试剂盒适用于新鲜及冻存脐血样本,对新鲜脐血样本采集时间限度要求低,48h内样本均可诱导培养。
- 40ml起始体系,终体系为2.5L,可收获50~70亿细胞,CD3 CD56<sup>+</sup>比例为60%-80%左右。

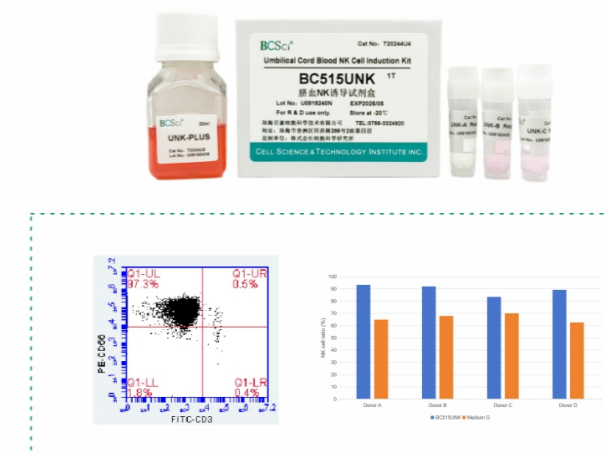

产品编号	产品名称	型号	说明	规格
T20244U4	脐血NK诱导试剂盒	BC515UNK	脐血NK细胞高效诱导培养	1T

## Frozen NK Cell Culture Reagent 冻存NK细胞培养试剂

- 为解决冻存PBMC复苏诱导NK存活率低、诱导难等问题,开发了用于冻存人外周血单个核细胞复苏后诱导NK细胞专用培养试剂盒。
- 独特的细胞复苏液及复苏技术,添加了优质细胞因子,使复苏的PBMC最大程度恢复至冻存前的生物活性,能有效诱导冻存PBMC成NK细胞,使之具有高纯度、高增殖、杀伤性强的特点。
- 本试剂盒由PBMC复苏液、NK细胞诱导剂、NK细胞活化剂、NK细胞扩增剂组成,配套细胞治疗研究专用ALyS505NK-AC&EX无血清细胞培养液、BC-515NK无血清细胞培养基使用,确保临床应用安全有效。
- 20ml起始体系,终体系为2.2L,可收获40~50亿细胞,CD3 CD56<sup>+</sup>比例50%~80%。

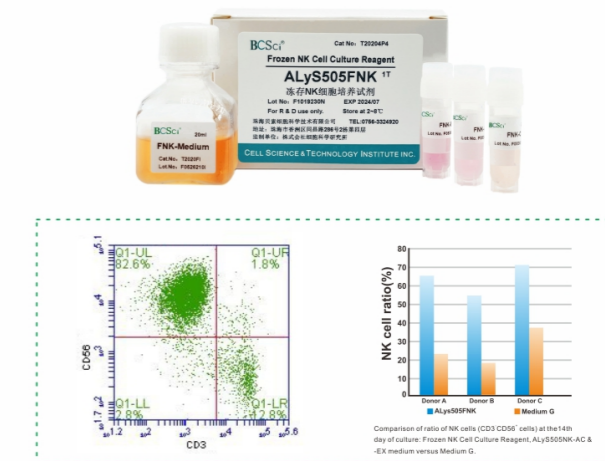

产品编号	产品名称	型号	说明	规格
T20204P4	冻存NK细胞培养试剂	ALyS505FNK	冻存人类PBMC诱导NK细胞培养,含高效复苏液	1T